


# LABOR-AKTION

A2.7L | Rev. 01 - 2023 | D

## Zirkon-Polierer „BlackPanther“-Serie

**High-End Premium Instrumente** - für monolithisches oder teilverblendetes Zirkon, Lithium-Disilikat (LS<sub>2</sub>) Glaskeramik und konventionelle Verblendkeramiken

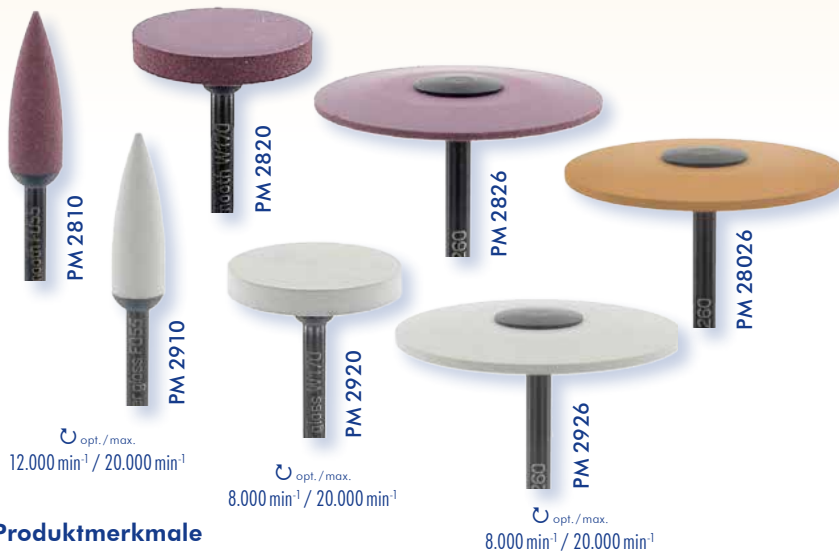

opt./max.  
12.000 min<sup>-1</sup> / 20.000 min<sup>-1</sup>

opt./max.  
8.000 min<sup>-1</sup> / 20.000 min<sup>-1</sup>

opt./max.  
8.000 min<sup>-1</sup> / 20.000 min<sup>-1</sup>

### Produktmerkmale

- Zwei-Stufen-Finish zum Glanz
- perfekte Oberfläche für den Antagonistenschutz
- abgestimmte Formenauswahl für alle Bereiche
- lange Standzeit (kein Trägerkern)
- sicher und effizient
- splitterfreie Bearbeitung scharfer Ränder und feinsten Bereiche bei Teilkronen, Inlays und Veneers
- **NEU**: grobe Variante **PM28026** zur Entfernung von Kleberüberschüssen an Abutments ohne zuzusetzen

### Artikel-Bonus

Zirkon-Polierer &  
Zirkon-Schleifer  
„BlackPanther“-Serie

je Art.-Nr.

Bitte bei Ihren/Ihrer  
**ökoDENT-**  
Fachberater(in)  
erfragen!

## PIGMARKER

Occlusionspray zur Erkennung von Frühkontakten und Störstellen

### Produktmerkmale

- leicht dosierbar, gezielt aufsprühbar
- haftet auf Metall, Keramik, Kunststoff, Gips, Zahnschmelz
- durch Verwendung lebensmittelechter Markierungsstoffe im Mund anwendbar
- gleichmäßiger, feiner Sprühnebel („rotzt“ nicht, tropft nicht)
- mit Wasser rückstandslos entfernbar
- restlos aufbrauchbar »»» sehr umweltfreundlich



### Artikel-Bonus


PIGMARKER

Art.-Nr.: **CO**

Bitte bei Ihren/Ihrer  
**ökoDENT-Fachberater(in)**  
erfragen!

Art.-Nr. : **CO**

## Zirkon-Schleifer „BlackPanther“-Serie

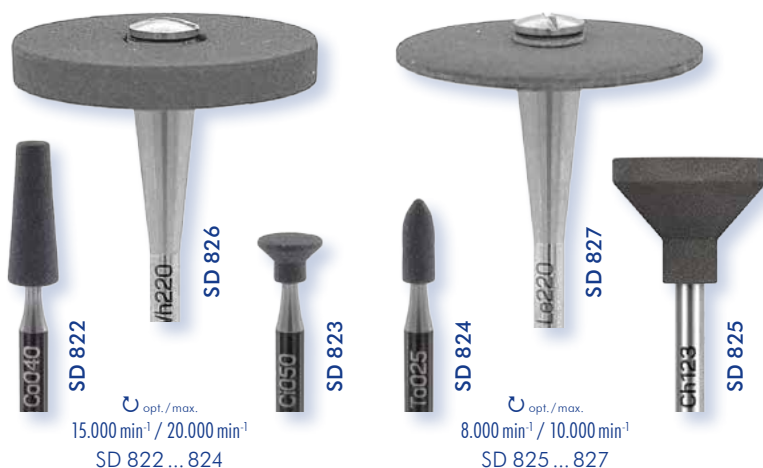

opt./max.  
15.000 min<sup>-1</sup> / 20.000 min<sup>-1</sup>  
SD 822... 824

opt./max.  
8.000 min<sup>-1</sup> / 10.000 min<sup>-1</sup>  
SD 825... 827

### Keramisch gebundene Schleifsteine mit besonderen Eigenschaften:

- hervorragendes Schliffbild
- lange Standzeit
- anwendungsfreundliche Geometrien

Die Schleifer sind optimal auf eine systematische Vorgehensweise in Verbindung mit der **Zirkon-Polierer** „BlackPanther“-Serie abgestimmt.

Die offene Struktur der neu entwickelten keramischen Bindung, sorgt bei korrekter Anwendung für eine gute Kühlung der keramischen Oberfläche, die für eine schonende, aber dennoch effiziente Bearbeitung notwendig ist.

Ein spezieller, schnittfreudiger Diamant ist verantwortlich für einen weichen Schliff und eine besonders feine Oberflächenvorbereitung.