

PRAXIS-AKTION

A2.7P | Rev. 01 - 2023 | D

Keramikpolierer CERA Shine Serie

Dreistufiges Diamant-Poliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall. Hervorragend geeignet als Korrekturwerkzeuge von Glanzbrandfehlern.

Blau = 1. Stufe:

Abtragen + Formen


U_{opt.} 5.000 - 10.000 min⁻¹



Pink = 2. Stufe:

Glätten


U_{opt.} 5.000 - 10.000 min⁻¹

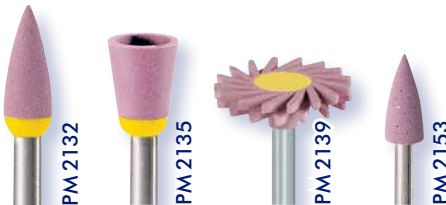

Grau = 3. Stufe:

Hochglanz-Politur

U_{opt.} 10.000 - 15.000 min⁻¹

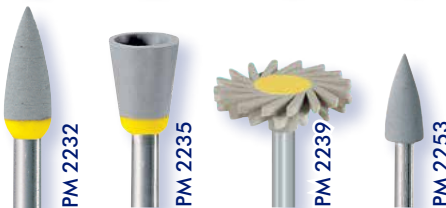

Gingiva Trimmer

- zur Modellation der Gingiva und für Gingivaschnitte
- für die Freilegung tiefer Kavitäten und intraossaler Implantate, sowie retinierter Zähne
- für die Erweiterung des Sulkus für Abdrücke
- zur Entfernung von Zahnfleisch-hyperplasie/Papillektomie und interradikulärem Granulationsgewebe

Sonderpreis

Gingiva-Trimmer

je Stück

Bitte bei Ihrem/Ihrer **ökoDENT-Fachberater(in)** erfragen!



GT016 FG

Wurzeltrenner, diamantiert

- Sehr schnittfreudige und gleichsam laufruhige Diamant-Instrumente zum Zähne- und Wurzeltrennen.
- Die spezielle Geometrie der Instrumente wirkt zuverlässig dem Zuschmireffekt entgegen.

Artikel-Bonus

Wurzeltrenner, diamantiert in FG & FGXL

je Art.-Nr.

Bitte bei Ihrem/Ihrer **ökoDENT-Fachberater(in)** erfragen!

Anwendung:

FG / FGXL U_{opt.} 100.000 min⁻¹ / **Auf ausreichende Kühlung achten!**



Artikel-Bonus

CERA Shine Serie

unsortiert

Bitte bei Ihrem/Ihrer **ökoDENT-Fachberater(in)** erfragen!

Artikel-Bonus

HF 118A ... FG

je Art.-Nr.

Bitte bei Ihrem/Ihrer **ökoDENT-Fachberater(in)** erfragen!

chirurgischer HM-Fräser HF 118 A


Für minimalinvasive, substanzschonende Präparation von Zahnhartsubstanz und Kieferknochen bei gleichzeitiger Schonung des angrenzenden Gewebes.

Produktmerkmale

- Höchste Laufruhe, effektive Schneidleistung, maximale Stabilität
- Schlanker „Hals“ garantiert freie Sicht (besonders wichtig beim Arbeiten mit der Lupe/Brille)
- Keramische ZrN (Zirkon-nitrit) Beschichtung für ein ausgewiesenes verschleißarmes und biokompatibles Instrument.

Indikationen

- Präparation von Knochen und Knochendeckeln
- Freilegen und Durchtrennen retinierter Zähne
- **PA-Spalt Erweiterung**
- Wurzelspitzenresektionen
- Hemisektionen

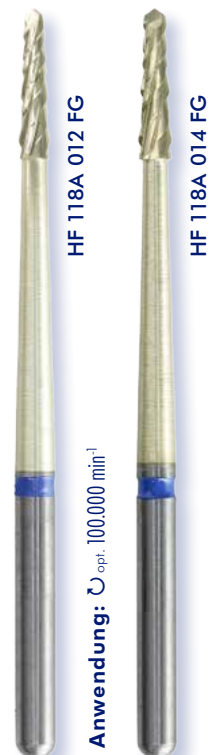

Anwendung: U_{opt.} 100.000 min⁻¹