


### CERA-WHITE

1. Stufe:  
Abtragen  
und Konturieren

1. Step:  
Removing  
and outlining

10.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>

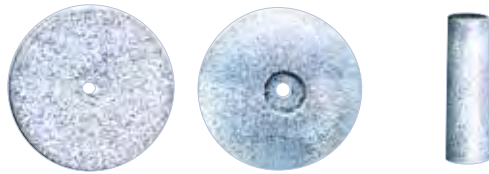

REF	P0301	P0310	P0315
Ø / L (in mm)	22 / 3	22 / 3,5	6 / 20
Schaft / shank			
	100/50/10	100/50/10	100/50/10

### CERA-PINK

2. Stufe:  
Glätten  
und Vorpholieren

2. Step:  
Smoothing  
and pre-polishing

10.000 min<sup>-1</sup>



REF	P0306	P0316	P0320
Ø / L (in mm)	22 / 3	22 / 3,5	6 / 20
Schaft / shank			
	100/50/10	100/50/10	100/50/10

### Anwendungshinweis

Ökonomische hart-flexible Silikonpolierer zum Abtragen, Glätten von Keramik.

Hellgrau = 1. Stufe:  
Abtragen und Konturieren

Pink = 2. Stufe:  
Glätten und Vorpholieren

### Recommendations for use

Economical hard-flexible silicon polisher for removing, smoothing of ceramic.

Light grey = 1. Step:  
Removing and outlining

Pink = 2. Step:  
Smoothing and pre-polishing

### CERA-SHINE

Diamantkörnung: grob  
Diamond grit: coarse

1. Stufe:  
Abtragen und Formen

1. Step:  
Removing and shaping

7.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM2010	PM2020	P2021	PM2026	PM2024	PM2029
Ø / L (in mm)	4 / 13	11 / 2	17 / 2,5	26 / 2	14 / 1,6	26 / 2,0
Schaft / shank	HP	HP	HP	HP	HP	HP
	5 / 1	5 / 1	5 / 1	1	5 / 1	1

### CERA-SHINE

Diamantkörnung medium  
Diamond grit: medium

2. Stufe:  
Glätten

2. Step:  
Smoothing

10.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM2110	PM2120	P2121	PM2126	PM2124	PM2129
Ø / L (in mm)	4 / 13	11 / 2	17 / 2,5	26 / 2	14 / 1,6	26 / 2,0
Schaft / shank	HP	HP	HP	HP	HP	HP
	5 / 1	5 / 1	5 / 1	1	5 / 1	1

### CERA-SHINE

Diamantkörnung fein  
Diamond grit: fine

3. Stufe:  
Hochglanzpolieren

3. Step:  
High-shine polishing

10.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>



REF	PM2210	PM2220	P2221	PM2226	PM2224	PM2229
Ø / L (in mm)	4 / 13	11 / 2	17 / 2,5	26 / 2	14 / 1,6	26 / 2,0
Schaft / shank	HP	HP	HP	HP	HP	HP
	5 / 1	5 / 1	5 / 1	1	5 / 1	1

### Anwendungshinweis

Dreistufiges Diamantpoliersystem zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall.

Blau = 1. Stufe:  
Abtragen und Formen

Pink = 2. Stufe:  
Glätten

Grau = 3. Stufe:  
Hochglanzpolieren

Durch die sehr kurzen Bearbeitungszeiten und die herausragende Qualität der Politur ohne Paste sind die CERA-SHINE Polierer sowohl als Korrekturwerkzeuge von Glanzbrandfehlern sowie zur nachträglichen Anpassung hoch geschätzt und ökonomisch.

Der Qualitätszuwachs gegenüber einer herkömmlichen Politur ist herausragend.

### Recommendations for use

3-step diamond polishing system for removing, smoothing and high-shine polishing of ceramic and metal.

Blue = 1. Step:  
Removing and shaping

Pink = 2. Step:  
Smoothing

Grey = 3. Step:  
High-shine polishing

Due to the very short process time and the excellent quality of polish without polishing paste, the CERA-SHINE polishers are highly valued and economic for repair tools of glaze bake mistakes and for subsequent adjustment.

The increase of quality is outstanding compared to a conventional polish.