

### CBR1S



REF	CBR1S
Ø (1/10 mm)	016
L (mm)	5,0
RA	016
	10

30.000 min<sup>-1</sup>

### CBR1V - Vollhartmetall full tungsten carbide




REF	CBR1V
Ø (1/10 mm)	018
L (mm)	8,0
RA	018
	10

30.000 min<sup>-1</sup>

- Zum Entfernen von Bracketkleber nach der Entbänderung.
- Die spezielle Verzahnung entfernt den Kleber ohne den Zahn dabei zu verletzen.
- Die unterschiedlich langen Verzahnungen erleichtern die Bearbeitung von kleinen und großen Flächen.
- *For removing of bracket adhesive after debonding.*
- *The special toothing removes the adhesive without injuring the tooth.*
- *Different lengths of toothing facilitate the preparation of small and large areas.*

### C22G (194)

gerade  
Verzahnung  
*straight  
toothing*

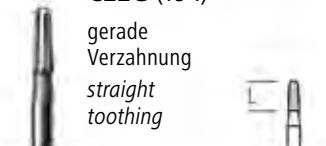


REF	C22G
Ø (1/10 mm)	016
L (mm)	5,0
RA	016
FG	016
	10

RA = 30.000 min<sup>-1</sup>

FG = 160.000 min<sup>-1</sup>

### C22S (194)


schräge  
Verzahnung  
*slant  
toothing*

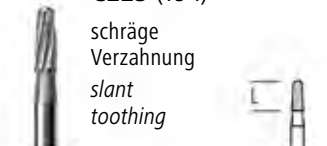

REF	C22S
Ø (1/10 mm)	016
L (mm)	5,0
RA	016
FG	016
	10

### C22SL (194)

schräge Ver-  
zahnung lang  
*slant toothing  
long*

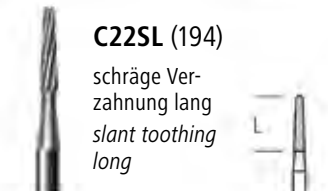

REF	C22SL
Ø (1/10 mm)	016
L (mm)	8,0
RAL	016
FGL	016
	10

#### Anwendungshinweis – C22 ...

- Zum Entfernen von Bracketkleber nach der Entbänderung.
- Lieferbar in den Schaftarten FG und RA.
- Die spezielle Verzahnung entfernt den Kleber ohne den Zahn dabei zu verletzen.
- Die Sicherheitsfase am Verzahnungsende reduziert die Gefahr von Riefen in der Schmelzoberfläche.
- Die unterschiedlich langen Verzahnungen erleichtern die Bearbeitung von kleinen und großen Flächen.
- Die verzahnungsfreie Spitze vermeidet Verletzungen des Gingivalsaums.

#### Recommendations for use – C22 ...

- *Designed for removal of bracket adhesive after debonding.*
- *Available as FG and RA shank.*
- *The special toothing removes adhesive without causing damage to the tooth.*
- *The security chamfer at the toothing end reduces the danger of striae at the enamel surface.*
- *Different lengths of toothing facilitate the preparation of small and large areas.*
- *The smooth non-cutting tip assures gentle finishing without damage to the gingiva.*

### H23 R (194)



REF	H23 R	H23 R
Ø (1/10 mm)	014	016
L (mm)	4,6	4,9
RA	014	016
FG	014	016
	10	10