

Wofasept® AHA

Alkoholisches Gel
zur hygienischen
Händewaschung



Wirksamkeit gegen Bakterien und Pilze nachgewiesen.
Sehr hautschonendes Gel - entzieht der Haut nicht die Feuchtigkeit -
trocknet sie nicht aus, klebt nicht.

Dadurch einfaches Anziehen der Behandlungshandschuhe möglich.
Nach Richtlinien der DGHM und gemäß EN 1499 geprüft.

zur hygienischen Händewaschung

Mit 1 x 3 ml Wofasept® AHA 30 Sekunden die Hände waschen.
Danach sind 99,95% der Testkeime abgetötet.



zur Händedesinfektion

Mit 2 x 3 ml Wofasept® AHA 1 Minute die Hände einreiben
und trocknen lassen (Keimreduktion 99,99%).

1-l-Spenderflasche für ökoDENT-Wandspender geeignet.

Gebinde	Menge	REF
Kittelflasche	100 ml	CH 1.01
Spenderflasche	1 l	CH 1.1
Kanister	10 l	CH 1.10

Wofasept® FL Sprühdeseinfektion

Gebrauchsfertige
Flächendeseinfektion



Wirksam gegen Bakterien, Pilze, lipophile Viren (HBV/HIV, humanes Rotavirus).
Materialverträglichkeit geprüft: Keine Spannungsrisskorrosion an Acrylglas.

Basiert auf dem nach den Richtlinien der DGHM
und der DVG (Lebensmittelbereich) geprüften und zertifizierten
Präparat Wofasept® FL-Konzentrat.

Unverdünnt aufsprühen, nach einer Minute
gegebenenfalls mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Gegen HBV – Einwirkzeit 30 Minuten

Zur Bekämpfung von Pilzen auf rohem Holz – Einwirkzeit 60 Minuten

Gebinde	Menge	REF
Kanister	5 l	CH 5.5
	500 ml	CH 5.05

**Wofasept® BI
Plural**

Gebrauchsfertiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Badwechsel-Indikator



Schnell wirkendes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für rotierende Dentalinstrumente.
Mit Badwechselindikator - bei Farbumschlag blau nach grün - wenn Blutbelastung des Bades überschritten.

Geprüft nach Richtlinien der DGHM für die Instrumentendesinfektion. Wirksam gegen Bakterien (einschließlich Mykobakterien), Pilze und Viren.

Mindesteinwirkzeit – unverdünnt 5 Minuten
(bei Verdünnung 1:1 mit Wasser – Mindesteinwirkzeit 15 Minuten)

Bei Grünfärbung oder Bodensatzbildung umgehend erneuern.
Entsorgung ins öffentliche Netz.

Nicht für Instrumente aus Aluminium!

Gebinde	Menge	REF
Kanister	5 l	CH 6.5

**Wofacutan®
Medicinal**

Parfümfreies, medizinisches Waschgel (für Haut-Allergiker geeignet)



Für Neurodermitiker geeignet

Medizinisch schonende Reinigung des ganzen Körpers (ebenso zur Haarwäsche) bei empfindlicher und beanspruchter Haut.

Hervorragendes Reinigungsvermögen, pH-neutral, alkaliseifenfrei, hautschonend.

Besonders geeignet bei Seifenunverträglichkeit und Parfümempfindlichkeit - weil rückfettend und parfümfrei.

Täglich oder nach Anweisung des Arztes.
Den allgemein üblichen Gewohnheiten gemäß.
Zum Baden dem Wasser ca. 10 - 20 ml zufügen.
1-l-Spenderflasche für ökoDENT-Wandspender geeignet.

In einer Untersuchung der Charité Universitätsmedizin Berlin wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Wofacutan® Medicinal nachgewiesen (Quelle: Hersteller).

Gebinde	Menge	REF
Kittelflasche	220 ml	CH 3.020
Spenderflasche	1 l	CH 3.1
Kanister	5 l	CH 3.5

**Wofacutan®
Pflegecreme**

Für normale und Problemhaut (für Haut-Allergiker geeignet)



Hautschutz bei trockener und rissiger Haut, Schutz und Pflege von beanspruchter Haut in medizinischen Berufen, Kälte- und Wetterschutz, Hautpflege bei Hautallergien, nach Bad, Sauna, Dusche, Sonnenbad sowie in der Fußpflege.

Pflegt und schützt die Haut, hält die Haut geschmeidig, feuchtigkeitsregulierend, schnell einziehend, nicht nachfettend, beruhigt gereizte Haut.

Gebinde	Menge	REF
Tube	70 ml	CH 2.0075
Minipack	5 x 70 ml	CH 2.0075M
Sparpack	10 x 70 ml	CH 2.0075S

PIGMARKER Occlusionsspray

zum Markieren
der Kontaktpunkte
prothetischer Arbeiten
und Kronen



Vorteile:

- leicht zu dosierender Farbpigmentfilm
- gezielt aufsprühbar
- haftet auf Metall, Keramik, Kunststoff, Gips, Zahnschmelz
- durch Verwendung lebensmittelechter Markierungsstoffe im Mund anwendbar
- mit Wasser rückstandsfrei entfernbar
- Restlos aufbrauchbar
- keine Pfropfenbildung
- tropft nicht
- umweltfreundlich



Gebinde	Menge	REF
Flasche	75 ml	CO

Nach LSG sind die Markierungsrohstoffe lebensmittelecht.

3D-Scanspray für dentale Anwendungen




Vorteile:

- Sehr feiner und homogener **weißer** Farbpigmentfilm
- dadurch dünn auftragbar = sparsam in der Anwendung
- **d.h.: Bestens geeignet für Anwendungen mit hohen Ansprüchen an Friktion und Passung**
- entspiegelt Oberflächen
- handliche Größe
- trocknet schnell
- nicht klebrig, leicht abzuwischen, abzudampfen oder wegzublasen
- zur **extraoralen und intraoralen Anwendung** geeignet (Verwendung lebensmittelechter Markierungsstoffe)
d.h. anwendbar für digitale Abformung

Gebinde	Menge	REF
Flasche	75 ml	CS

Kältespray Spray zur Vitalitätsprüfung

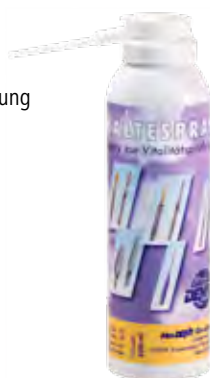

- Kältespray ist hervorragend zum Vereisen von Schaumstoffpellets und Watterollen sowie zur Vitalitätsprüfung an Zähnen in der zahnärztlichen Praxis geeignet.
- Es eignet sich ebenfalls zum raschen Abkühlen von Abdruckmaterialien oder Tiefziehfolien.

Gebinde	Menge	REF
Flasche	200 ml	CK

Easyoil
Universaladapter
für Ölspray



REF OS EASY

Universal Ölspray
500 ml

Nutzen Sie unser ökodent **Universal Ölspray** mit **EasyOil**, dem Multi-Adapter-Aufsatz mit hochpräzisen, massiven Aluminium-Adaptoren für die sichere, einfache und schnelle Pflege Ihrer dentalen Winkel- und Handstücke, Turbinen und Köpfe sowie Luftmotoren der führenden Marken-Hersteller.



REF OS

Easyoil
Schaumstoffdichtung

REF OS EASY01

Easy-Adapter
1 Stk / Pck



REF	Easy ...	PZ	CA	BA	CS	KV
	für	Spannzangen	Winkel- und Handstücke	Bien Air	Castellini	KaVo

Easy-Adapter
1 Stk / Pck

Ohne Abbildung



Ohne Abbildung



REF	Easy ...	MR	NK	QD	SR	WH
	für	Morita	NSK PTL	NSK QD	Sirona	W&H



Qualität zahlt sich aus!

Quality pays off!

ökoDENT Preußner OHG
Lindenweg 13
07639 Tautenhain
Germany

Fon +49 (0)3 66 01 5 09-29
Fax +49 (0)3 66 01 5 09-19

www.oekodent.de
sales@oekodent.de
vertrieb@oekodent.de



2019

2019.01

Alle Rechte der Verbreitung jeglicher Abbildungen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung. Technische Produktänderungen sowie Farbänderungen bleiben vorbehalten.

All rights of distribution of any pictures require our written permission. Technical product changes as well as color changes are reserved.